

# PLEGO



**VERMEIREN**  
we care for you

# Eenvoudig op te vouwen



**24,5 kg**  
Totaal gewicht

# Ontdek de wereld met Plego



Elektrische rolstoelen zijn soms lastig om op te bergen vanwege hun groot formaat of hun gewicht ook als u op reis bent. Plego biedt hiervoor een oplossing. Deze is een lichtgewicht elektrische rolstoel die eenvoudig kan worden opgevouwen. In deze positie blijft de Plego netjes rechtop staan en kan hij, net als een koffer, worden verplaatst of meegenomen.

Of je nu gewoon op pad bent voor een korte trip naar de winkel of een stad wil verkennen, Plego is je ideale partner om je mobiliteit te vergroten. De 2x250W borstelloze motoren zijn niet alleen stil en krachtig tijdens het rijden, ze zijn ook onderhoudsarm en duurzaam in gebruik.

Plego heeft diverse opties zoals extra opbergruimte of verlichting.



## GEMAAKT IN EUROPA

### STEEDS VERTREKKENSKLAAR!

De Plego is gebaseerd op meer dan 65 jaar Belgische expertise en hij wordt ook volledig vervaardigd in Europa.

Deze lichte elektrische rolstoel vertegenwoordigt ons streven naar de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort. Ontdek zeker alle voordelen en kenmerken van de Plego en geef je bewegingsvrijheid een boost.





Eenvoudig op  
te bergen

In slechts enkele stappen verander je de Plego in een compacte en eenvoudig op te bergen rolstoel. Dankzij het gereedschapsvrije systeem kan je de Plego opvouwen zonder al te veel inspanningen of hulp van derden.

Eens opgevouwen lijkt de Plego als twee druppels water op een reiskoffer. De vier extra wielen zorgen voor stabiliteit en zorgen er ook voor dat je de Plego heel eenvoudig kan verplaatsen.

Ondanks de krachtige motoren bedraagt het totale gewicht van de Plego slechts 24,5 kg. Eens opgevouwen neemt deze rolstoel amper plaats in in de kofferbak van je wagen.



# Tot 21 km\* 6 km/u

Met een maximale snelheid van 6 km/u is Plego een perfecte keuze om er samen met vrienden of familie op uit te trekken. Deze maximale snelheid is moeiteloos te volgen door de mensen die je vergezellen tijdens je uitstapje. De lichtgewicht Lithium-ion batterij geeft je een rijbereik tot wel 21 km. Perfect voor een dagje uit!

## PLEGO - KRACHT

Voor de motoren van de Plego hebben we gekozen voor kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie. De borstelloze motoren met een vermogen van 2 x 250 W zijn voorzien van een ingebouwd tandwielmechanisme wat resulteert in efficiëntie en een langere levensduur. De onderhoudsarme motoren zijn door hun ontwerp niet alleen kostenbesparend maar ook geluidsarm tijdens het rijden.



\*17,5 AH ACCU






# Extra batterij nodig?

Klaar voor een dagje uit? Controleer eenvoudig de batterijstatus terwijl je al in je rolstoel zit dankzij onze batterij status-indicator. De Lithium-ion batterij kan je beveiligen met een anti-diefstalsleutel of opladen terwijl je nog in de stoel zit. Het is niet nodig je Plego vlak naast het stopcontact te plaatsen. Neem de batterij mee en laad deze op waar het u het beste uitkomt. Het is belangrijk op te merken dat de Plego werd goedgekeurd voor luchttransport volgens de IATA-normen\*

Niet 100% zeker over het rijbereik of het opladen van uw batterij? Verleng je rijbereik met een extra accu (12,8Ah of 17,5Ah) die eenvoudig onder je stoel kan worden opgeborgen dankzij de extra opbergtas. Bekijk de opties op pagina 28 om je Plego te personaliseren.

\*Raadpleeg onze handleiding voor de meest actuele informatie. Contacteer ook steeds uw luchtvaartmaatschappij daar elke maatschappij vaak andere regels hanteert.



Verwijderbare  
lithium-ion  
batterij





### EENVOUD

De besturing van je Plego is eenvoudig en efficiënt. We hebben gekozen voor een hoogwaardige elektrische besturing van het merk Penny & Giles om je het best mogelijke stuurcomfort aan te bieden. Deze besturing is één van de beste die op de markt verkrijgbaar is voor elektrische rolstoelen. De standaardinstellingen van de besturing zorgen voor een soepele en comfortabele rijervaring van 's werelds meest toonaangevende fabrikant van elektrische rolstoelbesturingen. Instappen en vertrekken maar!

### GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP

De besturing kan links of rechts worden gemonteerd en is optioneel wegzwenkbaar. Optionele LED-verlichting, voor en achter, voor een betere zichtbaarheid kunnen worden voorzien en zijn onafhankelijk van de besturing te gebruiken.





## Op Avontuur?

Maak je geen zorgen over het nemen van scherpe of korte bochten of het navigeren door smalle winkelgangen. Dankzij de compactheid en de kleine draaicirkel van de Plego kan je nu dag en nacht zorgeloos rondrijden. Het lichtgewicht kader en het gebruiksvriendelijke vouwsysteem maken dat je je Plego overal mee naartoe kan nemen en zonder zorgen stad en kleine binnenruimtes kan verkennen.

Geen auto bij de hand? Je Plego kan eenvoudig in een bus of ander vervoersmiddel rechtopstaan. Ontspannend onderweg naar je eindbestemming!



GA VERDER

# We geven om u

**VERMEIREN**, fabrikant van rolstoelen sinds 1957, is een belangrijke speler in de wereld van medische apparatuur. Door de jaren heen heeft de groep Vermeiren zich gespecialiseerd in de productie van rolstoelen, verpleegbedden, comfortstoelen en elk ander product dat een patiënt of gebruiker kan begeleiden bij het behouden van zijn autonomie en mobiliteit.

GA ELEKTRISCH



# Thuis

Wanneer en waar je de Plego gebruikt, kies je volledig zelf. Deze lichte en opvouwbare elektrische rolstoel kan worden opgeborgen wanneer je hem niet nodig hebt of je kan hem de hele dag binnenshuis gebruiken. Neem probleemloos scherpe bochten in je huis. Met een breedte van slechts 59,5 cm rijdt je Plego door standaard deuropeningen en voorkom je beschadigingen aan deurstijlen. Geen behoefte aan je Plego wanneer je thuis bent? Berg hem stofvrij op dankzij onze optionele Plego hoes.





Je Plego is het resultaat van meer dan 65 jaar ervaring met rolstoelen. Of het nu standaardfuncties zijn of meer complexe handelingen... we bieden optimaal comfort en veelzijdigheid aan voor alle gebruikers. Zowel de rug als de zit zijn bekleed met 3D Net-stof die de luchtstroom, het comfort en het ademend vermogen optimaliseert.



## DE PERFECTE METGEZEL

Aan de achterkant van de Plego vind je een standaard meegeleverd opbergvak, perfect voor een laptop of wat leesmateriaal.

Niet genoeg ruimte? We kunnen je twee extra tassen aanbieden voor meer opbergmogelijkheden.

Je zal merken dat je Plego beschikt over een kwalitatief aluminium frame dat als geen ander bestand is tegen slijtage.

De opklapbare voetplaat uit één stuk is verstelbaar in twee hoogtes en heeft ook een dubbele functie. Niet enkel ondersteuning voor de voeten bij het neerzitten maar ook bescherming van het frame en de batterij bij het vervoeren van de rolstoel in opgevouwen positie.



## C77 Glanzend Zwart

Zwart, het summum van tijdloze verfijning, roept een gevoel op van mysterie en elegantie. Het belichaamt kracht en autoriteit en symboliseert vaak formaliteit en prestige. In mode en ontwerp fungeert het als een veelzijdig canvas, waardoor de impact van andere kleuren wordt versterkt en tegelijkertijd een vleugje elegantie aan elke context toevoegt.



## C88G Glanzend Goud

De stralende aantrekkingskracht van goud is synoniem van rijkdom, luxe en prestatie. Het belichaamt welvaart en succes of een verlichtend pad naar weelde. Als symbool van welstand overstijgt goud tijd en cultuur en laat het een glinsterend erfgoed achter van overdaad en grootsheid.





## C56G Metallic Blauw

Metallic blauw vertegenwoordigt een samensmelting van moderniteit en innovatie en belichaamt de strakke, high-tech esthetiek van de toekomst. Deze koele en futuristische kleur boeit met zijn gevoel van precisie en efficiëntie. In verschillende sectoren weerspiegelt deze kleur een geavanceerd technologisch ontwerp en symboliseert vooruitgang en aanpassingsvermogen.



## C52 Glanzend Turkoois

De kalmerende tint turkoois verenigt rust en balans. Zijn rustgevend invloed roept de serene eigenschappen op van de natuur, vergelijkbaar met het ongerepte water van tropische paradijzen. Als een kleur van vernieuwing en verjonging bevordert het gevoelens van welzijn en spirituele groei.



# C87G

## Glanzend Meloen Oranje

Meloen oranje straalt warmte en enthousiasme uit en vult de omgeving met een uitbarsting van energie en vreugde. Deze levendige kleur wordt geassocieerd met creativiteit en speelsheid, waardoor het een perfecte keuze is voor uitgesproken bijeenkomsten en artistieke uitspattingen. Het belichaamt de geest van viering en vrolijkheid.



# C4G

## Glanzend Rood

Rood doet, meer dan alle andere kleuren, de passies in ons ontvlammen en vertegenwoordigt liefde, energie en opwinding. Deze gedurfde en levendige kleur trekt moeiteloos alle aandacht. Het zij in de wereld van de romantiek, kunst of design. Deze kleur symboliseert vastberadenheid en moed in resonantie met de vurige essentie van de menselijke geest.





**B64** OPBERGTAS  
ONDER DE ZIT



**B63** OPBERGTAS ACHTER  
DE VOETPLAAT



**SE19** VERLICHTING



**H00FDSTEUN**




**ESE45**  
OPBERGHOES

## Opties

Om tegemoet te komen aan voorkeuren en persoonlijke wensen, hebben we meerder opties voorzien die naadloos aansluiten aan jouw noden.



**EXTRA BATTERIJ**  
12,8 AH OF 17,5 AH

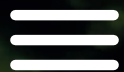

Vermeiren.fm

PLEGO



VERMEIREN  
reis afspeellijst



BELUISTER ME VIA SPOTIFY



# PLEGO

## Technische informatie

■ Totale breedte	595 mm
■ Totale lengte	1000 mm
■ Zithoogte	530 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Zitdiepte	430 mm
■ Hoogte rug	460 mm

■ Batterijen	12,8 Ah - 24 V   17,5 Ah - 24 V
■ Motoren	2 x 250 W
■ Snelheid*	6 km/h
■ Actieradius*	15 km   21 km
■ Gewicht	24,5 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg

\*Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend.  
\*Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

### N.V. VERMEIREN N.V. VERMEIREN Nederland B.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

